

POST-OP-SCHUHE POST-OP-SHOES



Wir  helfen

Vorfußentlastungsschuh Forefoot Relief Shoes



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
kürzbar

Hook and loop strap
can be shortened



Artikel-Nr. / Article no.
322047

Größe / size 33/34 - 47/48

INDIKATIONEN


- postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera auf dem Fußrücken oder an den Zehen
- bei akuter Schwellung des Vorfußes bei Gichtanfall oder Bursitis

Durch eine 30 mm starke nach vorne hin ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß, wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird während der Schrittabwicklung verhindert und die plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur Heilung vorhandener Fußwunden.


INDICATIONS

- postoperative forefoot surgery
- posttraumatic forefoot injuries
- open wounds and ulcers

Offloading of the forefoot is achieved by a 30 mm thick wedge underneath the hindfoot which shifts the weightbearing load backwards preventing the natural dorsal extension of the forefoot during gait. This resulting in the reduction of plantar pressure loading, allowing the area an increased rate of healing for any forefoot injuries.

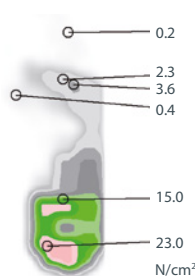

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

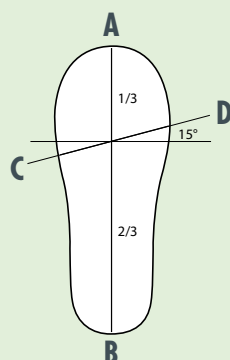

Hilfsmittel-Nr.:

31.03.03.5022

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
nach DIN EN ISO 10993

Inner lining tested
for harmful substances



Medizinprodukt
der Klasse I

Medical product
class I



leicht waschbar

easy to wash



links/rechts
einsetzbar

left/right foot
usable



atmungsaktives
Material

air permeable
material

Vorfußentlastungsschuh Forefoot Relief Shoes



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322149

Achillessehne
freigelegt

Achilles tendon
exposed

Klettband
kürzbar

Hook and loop strap
can be shortened

Klettverschluss
mit Umlenkrolle

Hook and loop fastener
with guided roll



Artikel-Nr. / Article no.

322147

Größe / size 33/34 - 47/48


INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera auf dem Fußrücken oder an den Zehen
- bei akuter Schwellung des Vorfußes bei Gichtanfall oder Bursitis

Durch eine 20 mm starke nach vorne hin ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß, wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird während der Schrittabwicklung verhindert und die plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur Heilung vorhandener Fußwunden.


INDICATIONS

- postoperative forefoot surgery
- posttraumatic forefoot injuries
- open wounds and ulcers located at the dorsal foot or toes

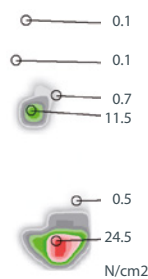

Offloading of the forefoot is achieved by a 20 mm thick wedge underneath the hindfoot which shifts the weightbearing load backwards preventing the natural dorsal extension of the forefoot during gait. This resulting in the reduction of plantar pressure loading, allowing the area an increased rate of healing for any forefoot injuries.

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

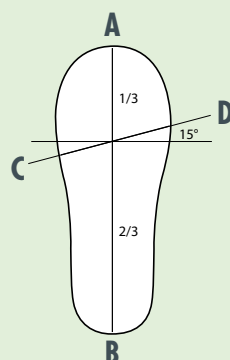

Hilfsmittel-Nr.:

31.03.03.5054

DIN EN ISO 10993

Innenfutter geprüft
nach DIN EN ISO 10993

Inner lining tested
for harmful substances

CE

Medizinprodukt
der Klasse I

Medical product
class I

30°C

leicht waschbar

easy to wash

L R

links/rechts
einsetzbar

left/right foot
usable

atmungsaktives
Material

air permeable
material

Verbandschuh Ferse geschlossen

Post-Op-Shoe Closed heel



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
 kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened



Artikel-Nr. / Article no.
322046
Größe / size 33/34 - 47/48


INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

INDICATIONS


- postoperative foot surgery
- posttraumatic forefoot injuries
- open wounds and ulcers
- feet with strong tendencies to swelling

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

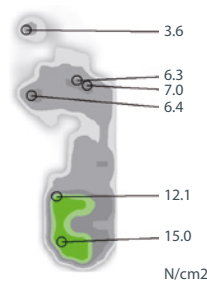

A rigid wedge sole 30 mm thick at the hindfoot assists the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot area of the sole unit is tapered and shaped to create a rocker sole which will allow the foot to roll off the metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading this area and relieving pressure on the joints allowing the area an increased rate of healing for any forefoot injuries.

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

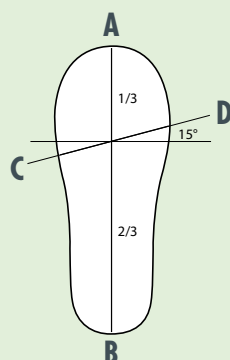

Hilfsmittel-Nr.: **31.03.03.4143**

DIN EN ISO 10993



Innenfutter geprüft nach DIN EN ISO 10993

Medizinprodukt der Klasse I

leicht waschbar

links/rechts einsetzbar

atmungsaktives Material

Inner lining tested for harmful substances

Medical product class I

easy to wash

left/right foot usable

air permeable material

Verbandschuh Ferse geschlossen

Post-Op-Shoe Closed heel



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322149

- Achillessehne**
freigelegt
Achilles tendon
exposed
- Klettband**
kürzbar
Hook and loop strap
can be shortened
- Klettverschluss**
mit Umlenkrolle
Hook and loop fastener
with guided roll

25 mm



Artikel-Nr. / Article no.
322146
Größe / size 33/34 - 47/48


INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

INDICATIONS


- *postoperative foot surgery*
- *posttraumatic forefoot injuries*
- *open wounds and ulcers*
- *feet with strong tendencies to swelling*

Eine 25 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

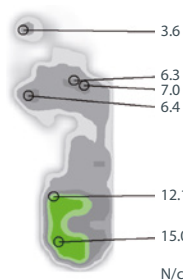

A rigid wedge sole 25 mm thick at the hindfoot assists the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot area of the sole unit is tapered and shaped to create a rocker sole which will allow the foot to roll off the metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading this area and relieving pressure on the joints allowing the area an increased rate of healing for any forefoot injuries.

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

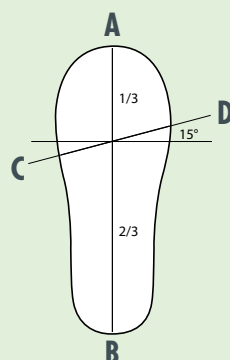

Hilfsmittel-Nr.: **31.03.03.4145**

DIN EN ISO 10993



Innenfutter geprüft nach DIN EN ISO 10993

Medizinprodukt der Klasse I

leicht waschbar

links/rechts einsetzbar

atmungsaktives Material

Inner lining tested for harmful substances

Medical product class I

easy to wash

left/right foot usable

air permeable material

Verbandschuh Ferse offen

Post-Op-Shoe Open heel



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
 kürzbar
*Hook and loop strap
 can be shortened*



30 mm

Artikel-Nr. / Article no.
322048
Größe / size 33/34 - 47/48


INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß- und Rückfuß Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

INDICATIONS


- postoperative foot surgery
- posttraumatic forefoot and rearfoot injuries
- open wounds and ulcers
- feet with strong tendencies to swelling

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

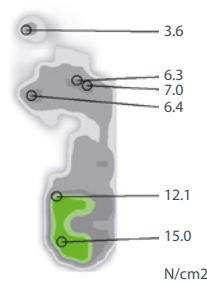

A rigid wedge sole 30 mm thick at the hindfoot assists the heel strike phase of the gait pattern. The forefoot area of the sole unit is tapered and shaped to create a rocker sole which will allow the foot to roll off the metatarsophalangeal joints quickly to avoid loading this area and relieving pressure on the joints allowing the area an increased rate of healing for any forefoot injuries.

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

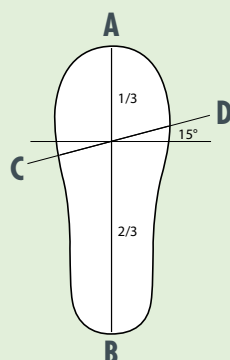

Hilfsmittel-Nr.: **31.03.03.4144**

DIN EN ISO 10993



Innenfutter geprüft nach DIN EN ISO 10993

Medizinprodukt der Klasse I

leicht waschbar

links/rechts einsetzbar

atmungsaktives Material

Inner lining tested for harmful substances

Medical product class I

easy to wash

left/right foot usable

air permeable material

Rückfußentlastungsschuh

Heel Relief Shoe



Passender Blatteinsatz
Suitable vamp
Artikel Nr. / Article no.
322049

Klettband
 kürzbar

*Hook and loop strap
 can be shortened*



Artikel-Nr. / Article no.

322003

Größe / size 33/34 - 47/48

INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen am Rückfuß
- posttraumatisch nach Rückfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera an der Ferse
- bei schmerzhaften, entzündlichen Erkrankungen des Rückfußes

INDICATIONS


- *postoperative rearfoot surgery*
- *posttraumatic rearfoot injuries*
- *open wounds and ulcers in the heel area*
- *with painful and infective illnesses of the heel area*

Durch eine 40 mm starke rigide Keilsohle unter dem Vorfuß wird der Rückfuß entlastet. Unter dem Rückfuß ist keine Sohle vorhanden. Das Verhältnis zwischen Rückfuß und Vorfuß beträgt 25% zu 75%, das heißt, die Keilsohle beginnt erst im Mittelfußbereich. Der Neigungswinkel der Sohle beträgt nach vorne hin laufend 7°. Dadurch wird das Körpergewicht auf den Vorfuß verlagert, der Rückfuß wird komplett entlastet und bietet beste Voraussetzungen zur schnellen Wundheilung.



The rearfoot is off loaded by the means of a rigid wedge sole unit of 40 mm thick, under the forefoot. There is no sole under the hindfoot. The ratio of hindfoot to forefoot is 25% to 75%, which means that the wedge heel only begins in the mid-foot region. The angle of inclination of the sole towards the front is 7°. This means that the bodyweight is shifted to the forefoot and the rearfoot is completely off loaded which provides the best conditions for healing.

Größe Size	Leistenlänge lasts length A-B (mm)	Ballenbreite ball width C-D (mm)
33/34	224	82
35/36	236	86
37/38	250	90
39/40	264	94
41/42	278	98
43/44	292	102
45/46	306	106
47/48	320	110

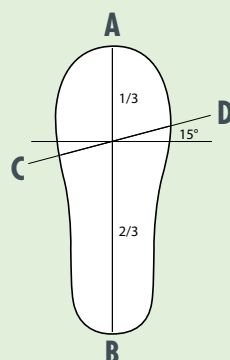

Hilfsmittel-Nr.:

31.03.03.5023

DIN EN ISO 10993



Innenfutter geprüft
 nach DIN EN ISO 10993

Medizinprodukt
 der Klasse I

leicht waschbar

links/rechts
 einsetzbar

atmungsaktives
 Material

*Inner lining tested
 for harmful substances*

*Medical product
 class I*

easy to wash

*left/right foot
 usable*

*air permeable
 material*

Ihr Fachhändler / Your specialist retailer:



03.0939.08.04.22

099990051

WHATSAPP



+49 2191 910-200

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.schein.de



Wir helfen